




THD BANDY

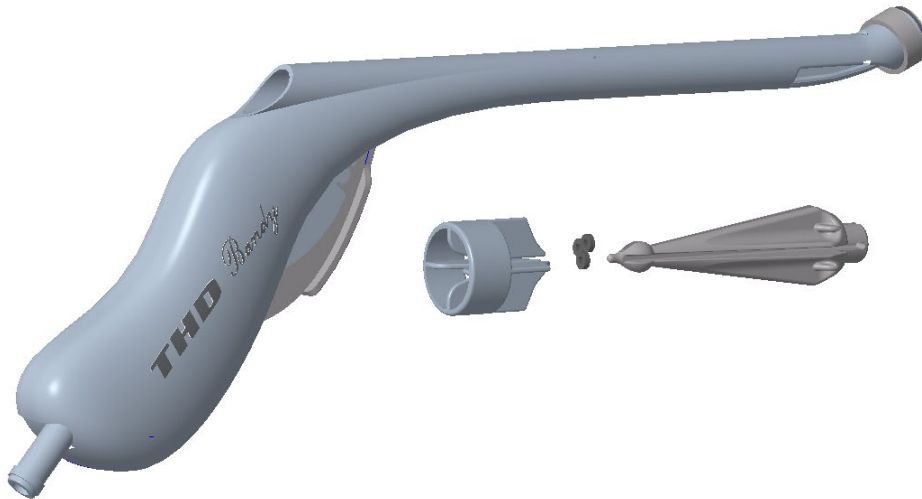

Gebrauch

THD Bandy ist ein Medizinprodukt für den Einmalgebrauch zur Behandlung von Hämorrhoidalleiden 2. Grades.

Allgemeine Beschreibung

THD Bandy ist ein Kit bestehend aus einem Saugligator und 4 elastischen Ringen zum Spannen der Gummibänder, die alle gebrauchsfertig verpackt sind.

THD Bandy wird an ein Saugsystem angeschlossen und ermöglicht es, die Menge des angesaugten Gewebes über eine Öffnung zu kontrollieren, die das Ansaugen oder Freisetzen der Schleimhaut ermöglicht. Das spezielle Design des Griffs ermöglicht die Bedienung mit nur einer Hand sowie ein schnelles und sicheres Entspannen des Gummibands.


Eigenschaften

- Aus medizintauglichem Polycarbonat gefertigt
- Erfüllt die Anforderungen an Biokompatibilität gemäß ISO 10993
- Lieferung mit 4 Einweg-Ringen
- Ladevorrichtung für die Ringe
- Gebrauchsfertig
- Leicht und handlich
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse IIa
- Einzeln verpackt
- Latexfrei



Vorteile

- Kann mit einer Hand bedient werden
- Praktisches Spannen des Gummibands

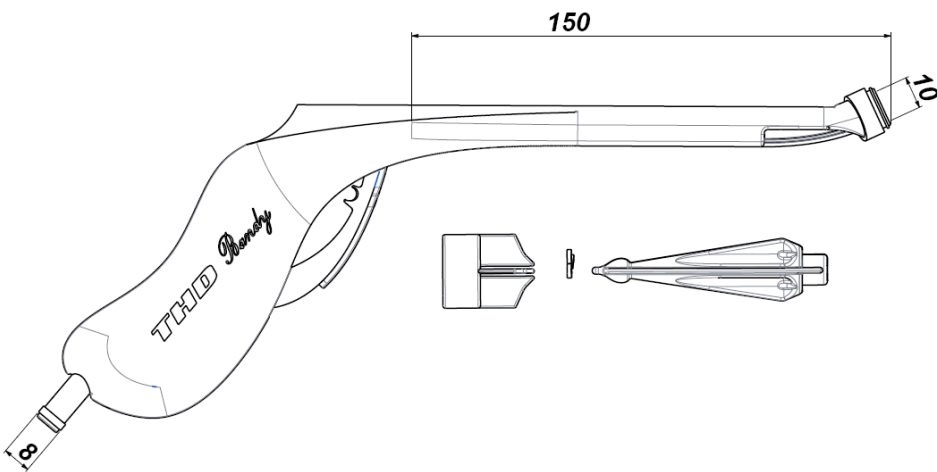Abmessungen	
	
Länge ohne Griff	150 mm
Öffnung Innendurchmesser	10 mm
Durchmesser Saugeranschluss	8 mm

THD Bandy				
Artikelnr.	Anz.	Beschreibung	Risikoklasse	
800079-10	10	THD Bandy	IIA	
inklusive	/	10	Einweg-Ligator	
inklusive	/	10	Spannkonus	
inklusive	/	10	Pressvorrichtung zum Spannen der Ringe	
inklusive	/	40	Gummibänder für die Ligatur	