


THD PROCTOSTATION

Die **THD ProctoStation** ist eine integrierte proktologische Diagnosestation. Die Proktologen können die wichtigsten diagnostischen Verfahren, wie **Anorektale Manometrie, Transanale Endosonographie und Hochauflösende Anoskopie**, mit diesem einzigartigen, modularen und erweiterbaren Diagnosesystem durchführen.

Sie umfasst:

- 1) **THD Procto Software** - INTEGRIERTE PROKTOLOGIE-SOFTWARE bestehend aus:
 - Modul für das Benutzermanagement
 - Modul für die Patientendatenbank
 - Modul für die Hochauflösende Anoskopie (Vergrößerung bis 39X)
 - Modul für die zweidimensionale Transanale Endosonographie
 - Modul für die Anorektale Manometrie
 - Modul für die Befundabfassung
 - Die THD Procto Software ist ein Medizinprodukt der Klasse IIA mit CE-Zertifikat 1936
- 2) **Dedizierte Hardware** bestehend aus einem All-in-One-PC mit:
 - 23" Bildschirm (1920x1080), 1TB Speicherplatz, Wireless GigaByte Ethernet LAN, Windows 10 Professional, drahtlose Tastatur und Maus.
- 3) **Trenntransformator (880027)** – diese Art Transformator reduziert Leckströme für die Sicherheit der Patienten. *TÜV-Zertifikat: EN60601-1-1:2006-3rd; EN60601-1-2:2007; IEC 60601-1:2005; IEC 60601-1-2:2007; TÜV-SÜD - NRTL C + US.*
- 4) **ProctoTrolley** - ein Wagen mit 5 drehbaren Rädern mit Bremse und (ausrichtbarem) Ziehgriff mit:
 - ausrichtbarem Zubehöraufnahmekorb
 - eingebauten Instrumentenaufnahmen
 - Ablage für zusätzliche Medizinprodukte

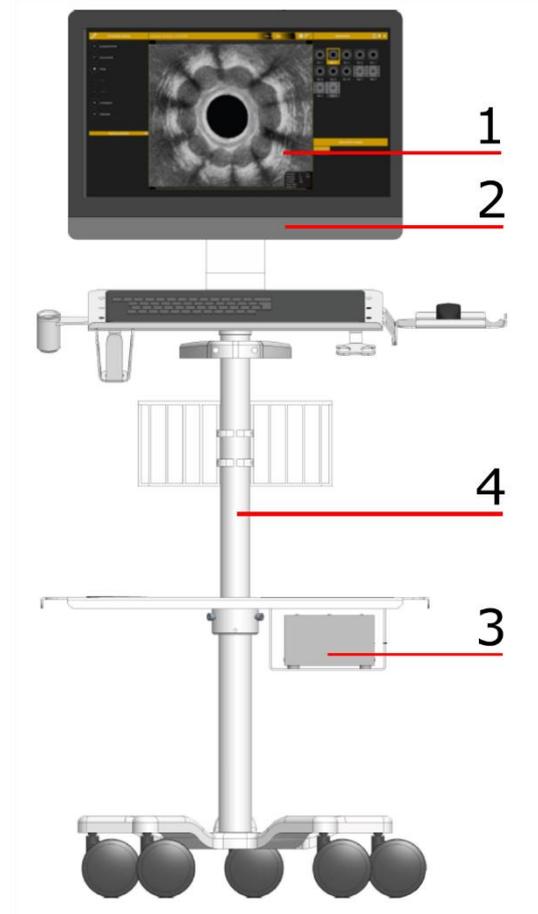



Abmessungen	
THD PROCTOSTATION	
Höhe	1500 mm
Breite vorn	800 mm
Tiefe	590 mm
Drehkreis Räder	740 mm
Gewicht (ohne Verpackung)	50 kg
Gewicht (Verpackung)	90 kg

Funktionseigenschaften	
Computer (Prozessor)	PC Touchscreen All in One (Core i5)
Speicher	8 GB
Betriebssystem	MS Windows 10
Festplatte	1 TB (7200 rpm)
Bildschirm	23,8" - Auflösung 1920x1080, ausrichtbar
Grafik	Intel® HD
Buchsen	7 USB 3.0; 1 HDMI; 1 Display-Port, 1 USB 3.0 Type-C
Verbindung	Gigabyte Ethernet LAN 10/100/1000 Wireless LAN 802.11 b/g/n
Stromversorgung	110V/240V – 50/60 Hz
Zubehör	Drahtlose Tastatur und Maus
Maximale Vergrößerung Anoskopie	39X

Zubehör			
ARTIKELNR.	Bezeichnung	Beschreibung	Verbindung
800227	THD HRA CAMERA 2.0	Hochauflösende USB-Videokamera	USB 2
800179	THD EAUS PROBE 12 MHZ	Transanale 12 MHz Ultraschallsonde	USB 2
800140	THD ANOPRESS	Gerät für Anorektale Manometrie	Bluetooth

Zubehör für THD ProctoStation				
ARTIKELNR.	Bezeichnung	Anz.	Beschreibung	Verpackung
800191	THD LIGHT-SCOPE PROCTO HRA	10	Anoskop für HRA mit Beleuchtungseinheit	Einwegartikel Unsteril
800150	THD PRESSPROBE (ENV)	50	Sonde für anale Manometrie	
800151	THD PRESSKIT (TR ENV)	50		
800152	THD PRESSKIT (FL ENV)	50		
800192	THD SENSYPROBE	15	Sonde für anorektale Manometrie	

THD PROCTOSTATION		
Anz.	Art-Nr.	Beschreibung
1	800198	THD PROCTOSTATION