

THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT - Elektrochirurgiegerät)



Gebrauch

Das Elektrochirurgiegerät A1250 ist ein Multifunktionsgerät für mono- und bipolare chirurgische Eingriffe.

Allgemeine Beschreibung

Das Elektrochirurgiegerät A1250 ist die elektrochirurgische Lösung für Operationssäle und Chirurgiezentren. Dieses Elektrochirurgiegerät hat 5 gemeinsame Energieausgänge, die eine Leistung von bis zu 120 Watt erreichen: Schneiden, Biegen, Koagulation, Stromschlag und bipolarer Standard.

Technische Daten	
Höhe	15.2 cm
Breite	26 cm
Tiefe	30.5 cm
Gewicht	< 4Kg
Versorgungsspannung	100-240 VAC
Versorgungsfrequenz	50-60 Hz
Ausgangsfrequenz	350-600 kHz




THD A1250 ESU: ZUBEHÖR

THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION

ARTIKELNR. 800206

Das Smoke-Evac Fusion Hand Piece ist ein Elektrochirurgie-Stift mit integriertem Rauchabsaugkanal. Das Handstück hat zwei Tasten: Schneiden (gelb) und Koagulation (blau). Das Gerät ist für den Einsatz mit Smoke-Evac Fusion Probes konzipiert, um eine chirurgische Umgebung ohne schädliche Dämpfe zu schaffen.

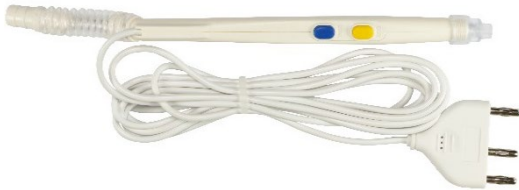

THD A1252C REUSABLE GROUNDING

ARTIKELNR. 800205

Das Reusable Grounding Cable – ESU wird in Verbindung mit den Disposable Grounding Pads – ESU (800204) verwendet, um einen risikofreien elektrochirurgischen Eingriff zu gewährleisten. Die Überwachung der Elektrodenneutralität von Bovie (NEM) erhöht die Patientensicherheit, indem das Kabel oder das Pad automatisch auf ihren ordnungsgemäßen Anschluss überprüft werden. Das Gerät wurde für 100 Anwendungen getestet. Das Produkt ist separat erhältlich.



THD GBS-DM1040A DIS GROUNDING

ARTIKELNR. 800204

Das Disposable Grounding Pad – ESU wird in Verbindung mit dem Reusable Grounding Cable – ESU (800205) verwendet, um ein risikofreies elektrochirurgisches Verfahren zu gewährleisten. Dieses Erdungspad ist mit einem Gelaufkleber für die korrekte Haftung am Patienten ausgestattet, bei sachgemäßer Anwendung vermindert es die Gefahr von Stromschlägen oder Verbrennungen. Das Produkt ist separat erhältlich.



**THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION****ARTIKELNR. 800207**

Das Smoke-Evac Fusion Suction Tubing Kit ist eine 2,5 Meter lange Tube mit Sauganschlüssen an jedem Ende. Die Steckverbinder sind für den Anschluss an den 8-10 mm Steckverbinder ausgelegt. Das Tubing-Kit ist für das Absaugen von Gas und Aerosolen aus der Elektrochirurgie konzipiert. Es ist nicht für den Einsatz mit Flüssigkeiten geeignet. Verwenden Sie das Tubing-Kit in Verbindung mit dem Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) und den Smoke-Evac Fusion Probes für ein rauchfreies Operationsfeld. Das Gerät ist separat erhältlich.

**THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING****ARTIKELNR. 800208**

Das Smoke-Evac Fusion Tissue Catch Tubing Kit ist eine 2,5 Meter lange Tube mit Sauganschlüssen an jedem Ende. Die Steckverbinder sind für den Anschluss an den 8-10 mm Steckverbinder ausgelegt. Das Tubing-Kit ist für das Absaugen von Aerosolen, Gas und Flüssigkeiten bei elektrochirurgischen Verfahren konzipiert. Verwenden Sie es in Verbindung mit dem Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) und mit Smoke-Evac Fusion Probes für ein rauchfreies Operationsfeld und für ein integriertes Flüssigkeitsabsaugungssystem ohne Inbetriebnahme des Smoke-Evacuator Filters. Das Gerät ist separat erhältlich.



THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT - Elektrochirurgiegerät)		
Artikelnr.	Anz.	Beschreibung
800182	1	THD A1250 ESU (ELEKTROCHIRURGIEGERÄT)
800206	1	THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION
800205	1	THD A1252C REUSABLE GROUNDING
800204	1	THD GBS-DM1040A DIS GROUNDING
800207	1	THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION
800208	1	THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING